

仕様

販売名	ヒブナス CPAP
商品名	Jusmine.C
認証番号	303AFBZX00090000
一般名称	持続的自動気道陽圧ユニット
クラス分類	高度管理医療機器／特定保守管理医療機器
商品コード	3341601
寸法	W258×H166×D110 (単位: mm)
本体重量	1400g
電源仕様	AC: 100~240V, 50/60Hz, 最大1.5A DC: 24V, 2.2A (HY52), 3.75A (HY90)
電气的定格	電撃に対する保護の形式: クラスⅡ 電撃に対する保護の程度: BF形装着部 水の浸入に対する保護の形式: IP21

動作環境	温度: 5℃~35℃ 湿度: 20%~93% (相対湿度、結露無し) 気圧: 70kPa~106kPa
保管環境	温度: -20℃~55℃ 湿度: 10%~93% (相対湿度、結露無し) 気圧: 70kPa~106kPa
圧力	設定圧力: 4-20 cmH ₂ O 圧力精度 (静的): ≤0.5 cmH ₂ O 圧力精度 (動的): ≤0.9 cmH ₂ O
加湿	容量: 280±20ml (最大給水レベル) 加湿: ≥12 mg/L

付属構成

- A. Jusmine.C 本体
- B. 呼吸回路
- C. AC アダプター (コード分割)
- D. SD カード (出荷時本体装着済)
- E. フィルター (出荷時本体装着済／予備 2 枚)
- F. バッグ
- G. ショルダーストラップ
- H. 取扱説明書
- その他・添付文書



オプション

- [3341602] Jusmine.C 用 チューブ
- [3341603] Jusmine.C 用 エアフィルタ (6 個入り)
- [3341604] Jusmine.C 用 加湿チューブ
- [3341605] Jusmine.C 用 電源アダプタ
- [3341606] Jusmine.C 用 SD カード

Peaceful sleeping.
Comfortable and Compact.

Jusmine.C

多機能、マルチ CPAP ジャスミン.C

- 加湿器分離
- 加湿レベル設定
- オート on/off
- 回路温度設定
- 利用者画面切替
- 予熱機能
- ImagineS 標準対応



[データ管理]



イマジンズ
遠隔モニタリングシステム **ImagineS**
本機での治療データを管理。
医療機関による管理・指導に活用できます。



■在宅医療データをまとめて管理

CPAP や酸素療法による在宅治療データを表やグラフで確認できます。

■災害など緊急時のスピーディな情報確認

対応機器から送信された位置情報により、ご利用者の所在地や災害発生時の被災地状況等、安全の確認ができます。

■スマートフォンアプリ対応による遠隔診療

ご利用者はスマートフォンアプリ「小池の在宅アプリ」での遠隔診療や治療データ確認が可能です。

●製品の色は印刷物の為実際の色と多少異なる場合があります。●製品の定格及びデザインは改善等の為予告なく変更する場合があります。●画像は一部合成です。

[発売元]

株式会社 小池メディカル
〒132-0031 東京都江戸川区松島1-24-8
TEL: 03(5662)6605
www.koike-medical.co.jp



■お問い合わせは…

[製造販売元]

株式会社 Inspired Medical Japan

Peaceful sleeping.

加湿器分離の小型 CPAP “Jusmine.C”。

通信機能の強化により「ImagineS (イマジンス)」※の利用がより身近になりました。基本性能に加え、呼吸追従性をアップし、眠りやすさのサポート機能を充実。また、加湿器の分離により、ポータビリティをアップ。用途に応じた利用方法をサポートします。

※ImagineS の提供は弊社独自のサービスです。詳しくはお近くの営業所へご確認ください。

多機能、マルチ CPAP *Jusmine.C*


☁ Compact : コンパクトデザイン

■ ディスプレイ／ボタン／ジョグダイヤル



カラーディスプレイで見やすい表示画面／ディスプレイ右のわかりやすい場所に操作ボタン、ジョグダイヤルを配置。／上にスタート - ストップボタン、下にランプ機能のリスタートボタン／ジョグダイヤルを回転・プッシュの簡単動作で治療結果や充実したリマインド機能を容易に選択・決定が可能。

■ 加湿器／送気口コネクタ

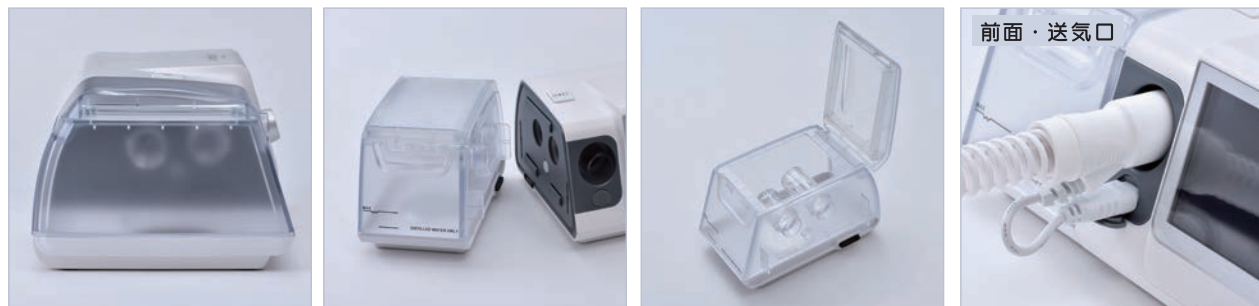

加温加湿器は分離型。着脱も給水も容易／水容量も一目でチェック／取り外しは上部ボタンをプッシュ／回路は本体前面へ、送気音を気にせずご利用可能。送気口コネクタは加湿された空気の流れ道をきれいに洗浄できるようにワンタッチで取り外し可能。

■ SD カードスロット／フィルター／キャリングバッグ




フィルターやデータカードなどの出し入れは本体左サイドへ集約／治療データは SD カードへ(左側面スロット)／フィルターは吸気口の開閉で容易に交換可能(背面左下)／専用バッグ付属でコンパクトに収納・持ち運びが可能。

☁ Comfortable : 快適機能

ブロアスピードの上昇、精密なブロアコントロールによる呼吸追従性のアップにより、吸気、呼気の自然な呼吸をサポートします。


また、DEP※機能の利用による更なる Peaceful Sleeping の提供を目指します。
※Decrease Exhalation Pressure

■ ブロアスピードの自社比較

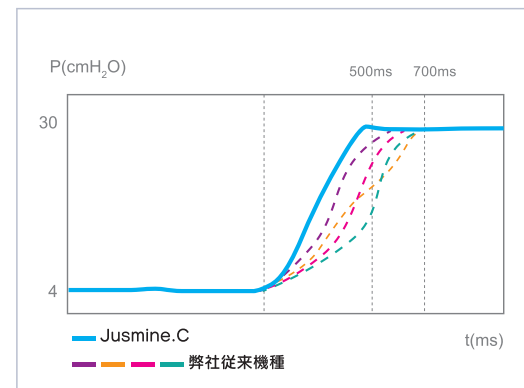

スムーズなコントロールによる呼吸追従性のアップ。

■ 5 段階の DEP 機能

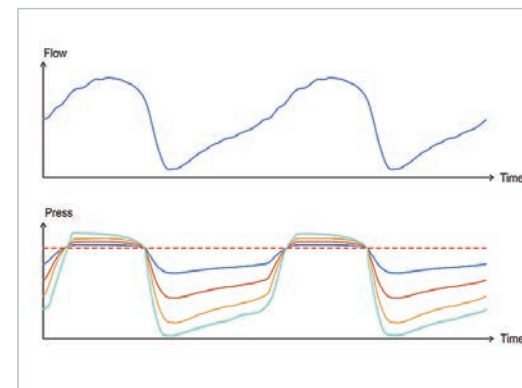

呼吸追従性のアップにより快適な呼吸サポート

☁ わかりやすいユーザーインターフェース

■ 機能設定メニュー



治療に必要な快適機能設定が可能

上段左から ①治療 ②情報 ③初期設定
④ランプ ⑤湿度レベル ⑥加温チューブ

■ 動作中



設定が一目でわかる動作画面

(APAP モード動作例)